

マグシャワーは交流磁気発生器です！

自転車の発電機から原子力発電機まで、みな「**導体**」(電気を伝える物、電線)の近くで磁力を変化させることによって導体に電気が発生します。マグシャワーは交流磁石(変化する磁石)発生機ですから、導体(電気の伝わる物、体の中の水分、血液、その他ほとんど)を近づけると、その中に電気が発生します。これを誘導電流といいます。体内に発生した誘導電流は、血液や筋肉をイオン化させその働きを促進します。人間には、本来、自然治癒力がありますが、病気や高齢化でその力が衰えて来ます。マグシャワーの誘導電流によって血液の循環が促進され、筋肉のコリや痛みが改善されます。

マグシャワーHY11

交流磁気発生器
表面磁力800 Gauss
電源コードの長さは1mと2mがあります。
医療機器の規格によって30分で自動的に電源が切れます



医療機器承認番号 22100BZX0104000

磁力の方向について

マグシャワーは交流磁気ですから磁力の方向(N極、S極)は1秒間に富士川以西の地域では60回、以東では50回交互に変化します。したがって、1台使用の場合は、どちら向きでも同じです。2台以上のマグシャワーを同時に使用する場合は50cm以内に近づけると、電気の流れの方向が同じ場合は互いに反発しあい、反対の場合は互いに引合います。電気の方向が分かる様にプラグに赤丸シールが貼ってあります。マグマットのように並べて使う場合は、赤丸を同じ方向に体を挟んで両側から使う場合は赤丸を逆方向に差し込んでください。



マグタイマーHY10

電源が切れてから1時間30分で自動的に入ります。
30分、20分、10分の3種類の切替えが出来ます。
(病状の重い方は、10分から始めましょう)



ライトマグテスターHY15-100

マグシャワーによって誘導電気が発電されている様子をライトの点灯で見ることができます。
2台のマグシャワーの磁力の方向を見る場合にも使います。



メーターマグテスターHY15-200

マグシャワーの磁力の強さをピーという音の大きさとメーターの針の触れで測定します。



マグマットHY12

マグシャワーが1枚(3分の1台)に各3台収納できます。
通常は頸部2台、腹部3台、足部2台計7台使用します。



マグホッパーHY15-400

マグシャワーの磁力の出ていることを中の豆磁石のホッピングで見ることが出来ます。人体を通過して、反対側でもホップします。




カラーマグホッパーHY15-500

マグホッパーと同じですが5色の豆磁石が入っています



マグコードセットHY13

マグマットにマグシャワーを収納する際に使用します。
上記、7台セットに使用してください。

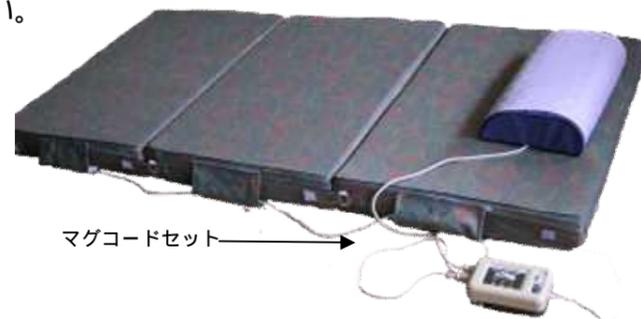

マグコードセット

マグパイプHY15-600

マグシャワーを掛けながら凝りがある部分に当てるとこの磁石が振動してマッサージします。



マグペブル

マグパイプと同じですが小型強力です。



マグホルダーHY14

マグシャワーを横向きに使いたい場合にセットします
寝た時の足裏などに使います。



マグピローHY16

マグシャワーを1台収納します。
首や肩の血行改善になります。



治療院用ベッド

ダウンアーム
HY20-200

マグベッド
HY20-100

